


CORPO CENTRALE

Cod. 01.0870.73

CORPI CENTRALI PER SOXHLET, ML 250, CONO F. 55/45 - CONO MASCHIO NS 29/32

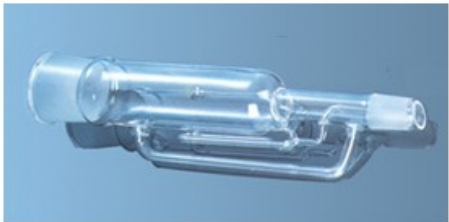

Descrizione

L 'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche. L' estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell' interno dell' estrattore. I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante. Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l' estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio. Corpo centrale, raccordo conico inferiore NS 29/32

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Capacità matraccio (ml)	500
Cono (NS)	55/45

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Capacità matraccio (ml)	Cono (NS)
01.0870.38	ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE	30	50	29/32
01.0870.51	CORPO CENTRALE	70	100	34/35
01.0870.57	CORPO CENTRALE	100	250	45/40
01.0870.64	CORPO CENTRALE	150	250	45/40

01.0870.69	CORPO CENTRALE	200	500	55/45
01.0870.73	CORPO CENTRALE	250	500	55/45
01.0870.79	CORPO CENTRALE	500	1000	60/46
01.0870.88	CORPO CENTRALE	1000	2000	71/51